

DÉPLOYER VOTRE LIBERTÉ

QS5 X



Fauteuils roulants
Ultra-légers



Quickie QS5 X
Potences Fixes



Quickie QS5 X
Potences Escamotables



5 BONNES RAISONS D'ESSAYER LE QS5 X®

1 PLIAGE ET DÉPLIAGE SANS EFFORT- ÉCONOMISER PLUS DE 40% D'ÉNERGIE* - Pliez le QS5 X sans effort grâce à un système de pliage unique. Une comparaison avec des fauteuils similaires montre que la technologie FREEFOLD réduit jusqu'à 40%* les forces nécessaires au pliage. Une fois plié, le QS5 X reste bien fermé grâce au verrouillage Quickie Locking System breveté en option. La technologie à votre service !

2 UN VRAI POIDS PLUME FACILE À SOULEVER - Avec un poids de transport de 7,3 kg seulement pour la version Potences Fixes et de 7,5 kg pour la version Potences Escamotables, le QS5 X est le fauteuil roulant à cadre fermé le plus léger de sa catégorie*. Grâce à son poids plume, rentrer ou sortir ce fauteuil roulant d'une voiture demande moins d'efforts.

3 SE PROPULSER AVEC MOINS D'ÉNERGIE ET PLUS D'EFFET - Le cadre QS5 X est le plus léger* mais aussi l'un des plus rigides du marché grâce à des processus de fabrication exclusifs et à des technologies propres aux produits de haute qualité de Sunrise Medical. Voyez la technologie de tubes ovalisés par exemple, ou le traitement thermique ShapeLoc pour renforcer des pièces en aluminium de série 7000. Grâce à ces technologies, le QS5 X offre des caractéristiques de conduite sublimes, réagissant directement au moindre effort. Économisez votre énergie pour les activités que vous aimez faire.

4 ÉLÉGANT MAIS ROBUSTE - Avec un croisillon ovalisé à 4 branches, des protections en caoutchouc (Touch Points) pour protéger les points de contact des rayures, des potences intégrées, le QS5 X est robuste et fiable - vous pouvez avoir l'esprit tranquille. Un design de cadre minimaliste et épuré lui confèrent beaucoup de style et d'élégance.

5 LA RÉPONSE À VOS BESOINS INDIVIDUELS - Deux versions de châssis, un support de fourche à triple réglage, un éventail d'options et d'accessoires assurent que le QS5 X peut s'adapter aux besoins de chacun - même si vos besoins peuvent changer au fil du temps.



Scannez le code QR
pour la vidéo -
Introduction générale du QS5 X

* Prouvé par des tests de référence internes (comparaisons qualitatives avec les performances de fauteuils roulants concurrents).

PERFORMANCE DE PLIAGE

(DÉ)PLIAGE SANS EFFORT - ÉCONOMISEZ PLUS DE 40% DE VOS FORCES*

FACILE À PLIER ET RESTE PLIÉ - Le QS5 X se plie sans effort grâce à une technologie innovante. Comparé aux autres systèmes de pliage courants, le système FREEFOLD réduit de 40%* la force nécessaire pour plier votre fauteuil roulant ! C'est tellement sans effort, que vous pourrez plier aisément votre fauteuil roulant de façon autonome depuis une chaise ou votre lit. De plus, votre fauteuil restera très stable lors du pliage, car grâce à une géométrie unique, l'angle des roues reste inchangé - un réel avantage si vous pliez et transportez fréquemment le QS5 X.



Scannez le code QR pour la vidéo -
Pliage et dépliage du QS5 X

Le système de verrouillage automatique breveté optionnel **Quickie Locking System** maintient le fauteuil plié en toute sécurité. D'un simple "clic", votre fauteuil roulant reste plié aussi compact que possible et verrouillé dans cette position. Le dépliage involontaire pendant le levage ou le chargement est ainsi évité. Une option très pratique !

* Prouvé par des tests de référence internes (comparaisons qualitatives avec les performances de fauteuils roulants concurrents).



Les **TUBES OVALISÉS** (même technologie de pointe que le Quickie Nitrum et le Quickie Xenon²) utilisés dans le croisillon 4 branches du QS5 X, offrent différents avantages par rapport aux tubes ronds conventionnels, notamment :

- Une rigidité et résistance exceptionnelle
- Un poids plume
- Des pertes d'énergie minimales
- Un pliage sans effort

Ces qualités contribuent à améliorer l'expérience de conduite, à éviter une sollicitation artico-musculaire excessive et à faciliter la vie quotidienne. Tout ce que vous attendez d'un fauteuil roulant léger !







Lignes épurées et modernes - Le QS5 X présente un design minimaliste. Les supports de fourches avant sont parfaitement intégrés. Connexions dissimulées, un minimum de vis exposées pour ne pas compromettre l'esthétique : tout pour donner à votre QS5 X une apparence élégante et épurée.



Scannez le code QR
pour la vidéo -
Rouler avec le QS5 X

LÉGÈRETÉ & RIGIDITÉ

LE QS5 X - PROPULSION EFFICACE, TRANSPORT FACILE

POIDS PLUME - Avec un poids de transport remarquablement bas à partir de 7,3 kg pour la version Potences Fixes et de 7,5 kg pour la version Potences Escamotables, le QS5 X est le fauteuil pliant le plus léger de sa catégorie*. Il en devient très confortable à soulever et à transporter. De plus, sa légèreté rend la propulsion plus efficace. Économisez votre énergie pour les activités que vous aimez faire ! Le **matériau** et la **conception** font toute la différence - solide n'est pas forcément synonyme de lourd. Le cadre du QS5 X est fabriqué en aluminium de haute qualité de la série 7000, conçu pour un rapport résistance/poids exceptionnellement élevé.

RIGIDITÉ SUPÉRIEURE - Grâce à l'utilisation d'aluminium série 7000, renforcé par un traitement thermique spécial, le cadre est 2,5 fois plus résistant et d'autant plus fin et plus léger. Le résultat est un fauteuil roulant remarquablement facile à soulever qui transfère efficacement votre poussée sur les roues : **effort de propulsion minimal, effet maximal.**



Scannez le code QR
pour la vidéo -
Emporter le QS5 X en voiture



Facile à soulever et à charger - que ce soit pour vous ou pour une tierce personne.

* Prouvé par des tests de référence internes (comparaisons qualitatives avec les performances de fauteuils roulants concurrents).



OPTIONS SMART

CONFORT & FONCTIONNALITÉ

TOUCH POINTS ERGONOMIQUES

Le QS5 X est doté de protections de cadre en caoutchouc aux points de contact les plus exposés aux rayures. Des protections « Touch Points » sur l'angulation du châssis fixe offrent une prise ferme optimale au moment de faire un transfert ou de soulever le fauteuil roulant, réduisant la tension exercée sur vos poignets. Les « Touch Points » protègent également le châssis des rayures. Ainsi votre fauteuil roulant gardera plus longtemps son look tout neuf !

DEUX VERSIONS DE CHÂSSIS

Pour les deux versions (Potences Fixes et Potences Escamotables), la longueur du cadre est adaptable à presque toutes les profondeurs d'assise. Ainsi le cadre reste compact, pas plus long que le strict nécessaire, facilitant les manœuvres dans les espaces étroits.

ALLER TOUJOURS TOUT DROIT

Évitez un fauteuil qui dérive ou une roue avant qui ne touche pas le sol. Le triple réglage du support de fourche (hauteur de fourche, angle de chasse, stabilité directionnelle) permet d'assurer une tenue de route et une résistance au roulement parfaites. Le cadre avant léger mais robuste est prévu pour pouvoir connecter une 5^e roue ou assistance électrique.

NOUVELLE PALETTE EN ALUMINIUM

La palette repose-pieds en aluminium a été redessinée pour une **réduction de poids** et pour **optimiser les réglages**.



FREINS À DÉBATTEMENT COURT

Par rapport aux freins standards, nos freins à débattement court augmentent les forces de freinage tout en réduisant les forces pour l'engager. Donc **moins de force pour un meilleur freinage** : une option intéressante si vous avez peu de forces dans les mains.



LUMIÈRES LED INTÉGRÉES PLUS CLAIRES

Les LED du QS5 X sont toujours là quand on a besoin d'un peu de lumière - pour se faufiler dans la salle de bain la nuit ou en sortant d'une soirée pour rentrer chez soi. Discrètement **intégrées** au design général de votre QS5 X, et aisément **amovibles pour la recharge**, ces LED sont un excellent moyen d'éclairer votre chemin lorsque vous en avez besoin. Votre sécurité est notre priorité !



LEVIER ARRIÈRE DE BASCULEMENT

Le levier de basculement breveté se relève automatiquement en cas de contact avec une bordure de trottoir ou une marche, empêchant le fauteuil roulant de s'accrocher ou de basculer. Sécurité avant tout !





Le compagnon parfait pour une assistance (électrique) ou cinquième roue - Le cadre avant est renforcé avec des pièces forgées, conçues pour résister à la charge élevée que les dispositifs d'assistance électrique ou une cinquième roue exercent. En même temps, la solidité et rigidité du cadre assurent une conduite très confortable.



Scannez le code QR pour en savoir plus sur le QS5 X

OPTIONS

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ - UN ÉVENTAIL D'OPTIONS ET DE RÉGLAGES

Le QS5X s'adapte à vos besoins, à votre personnalité et à votre vie, simplement et efficacement. Les multiples possibilités de réglage et une large gamme d'options et d'accessoires permettent de créer un fauteuil roulant parfaitement adapté. Et si vos besoins ou goûts évoluent, votre fauteuil évoluera avec vous, avec la même simplicité.

Avez-vous des besoins spécifiques en matière d'assise et de positionnement? Votre QS5 X peut aisément être complété par différents **coussins d'assise et dossiers JAY®**.



Scannez le code QR pour le catalogue Options en accessoires



Scannez le code QR pour la brochure Jay



Choisissez parmi 24 coloris de châssis vibrantes, différentes couleurs pour les fourches, roues avant, moyeux et jantes. C'est vous qui décidez !





VERSIONS DE CHÂSSIS

POTENCES FIXES OU ESCAMOTABLES - 1 CONCEPT, 2 TYPES DE CHÂSSIS

Le QS5 X est disponible en deux versions de châssis - Potences Fixes et Potences Escamotables.

Le châssis à **Potences Fixes** est la solution la plus légère parce que la géométrie des potences vise une simplicité et rigidité maximale. En conséquence, le fauteuil roulant est plus stable et votre énergie est transmise de manière très efficace. Ces potences permettent également un positionnement très précis des jambes. Ce type de châssis convient notamment aux personnes recherchant des performances de conduite optimales ou ayant des besoins de positionnement élevés.

Le châssis pour **Potences Escamotables** permet l'utilisation de différentes potences escamotables et amovibles. Faire pivoter les repose-pieds sur le côté facilite grandement les transferts dans et hors du fauteuil. Retirer les repose-pieds permet de placer le fauteuil roulant encore plus près d'un objet, par exemple un lit ou une chaise. Le retrait des repose-pieds facilite également le transport du fauteuil roulant, réduisant la taille du fauteuil roulant.



OPTIONS

CRÉER VOTRE QS5 X

Configurez votre propre QS5 X en ligne avec notre **visualiseur 3D**. Choisissez les accessoires et options de configuration qui vous plaisent et voyez directement le résultat en 3D. Trop cool !



Scannez le code QR
pour le Visualiseur


Consultez notre catalogue **Options et accessoires** pour aperçu très détaillé de TOUTES les options disponibles.



Scannez le code QR
pour le catalogue
Options & accessoires

Vous avez des souhaits particuliers ? Notre équipe **Built-4-Me** propose une multitude de fabrications spéciales pour un QS5 X unique ! Demandez conseil à votre revendeur.

built4me

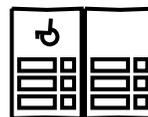

NOS MODÈLES

KIM



Kim a été diagnostiquée avec une amyotrophie spinale (SMA) à l'âge de deux ans et se déplace en fauteuil roulant depuis une vingtaine d'années. Néanmoins, c'est une voyageuse passionnée qui aime explorer le monde sur quatre roues. Son blog de voyage, Wheeliewanderlust, offre un aperçu de ses expériences de vacances passionnantes et fournit des conseils utiles aux personnes intéressées par les voyages sans obstacles.

<https://wheeliewanderlust.de/barrierefrei-durch-den-freizeitpark-efdeling/>

<https://wheeliewanderlust.de/category/reiseziele/belgien/>

TAREK



La vie de Tarek a toujours tourné autour des vélos, de son enfance à aujourd'hui. Il était un professionnel du BMX et VTT freestyle jusqu'au jour d'un atterrissage raté en 2002. Une paraplégie mit fin à sa carrière mais Tarek est resté fidèle à la scène. Il a fondé avec succès sa propre entreprise, Rasoulution et reste une personne influente dans le monde du VTT, toujours soucieux de faire progresser le sport. En 2022 il a été intronisé au Mountainbike Hall of Fame.

<https://rasoulution.com/team/tarek-rasouli/>

JOSH



Josh est un vétérán décoré de la Purple Heart Order. Il a servi dans le corps des Marines des États-Unis jusqu'à l'explosion d'un EEI en Afghanistan en 2009. Le désir de conduire à nouveau malgré la lésion médullaire cervicale résultant de l'explosion, a donné un nouveau sens à sa vie. Non seulement a-t-il atteint son objectif ; Josh et son coach major Tammy Phipps ont ensuite fondé le Driver Rehabilitation Center of Excellence. Ce centre aide les personnes dans sa situation à retrouver leur autonomie avec des programmes de conduite adaptée.

DONNÉES TECHNIQUES	QS5 X
Poids max. utilisateur	140 kg
Largeur d'assise	340 - 540 mm (par paliers de 20 mm)
Profondeur d'assise	340 - 500 mm
Hauteur d'assise - avant	360 - 540 mm
Hauteur d'assise - arrière	350 - 520 mm
Hauteur du dossier	250 - 500 mm
Angle de dossier	de -15° à +15°
Largeur totale	largeur d'assise +180/240/270 mm pour carrossage 0°, 2°, 4° et roues 25"
Longueur totale	à partir de 1113 mm (mesure entre face arrière des roues arrière et l'avant de la palette)
Hauteur totale	à partir de 1020 mm
Types de châssis	Potences Escamotables ou Potences Fixes
Angle châssis	Potences Escamotables: 70° / 80° / 90°, Potences Fixes: 75° / 85°
Roues avant	4", 5", 6", 7"
Roues arrière	22", 24", 25", 26"
Poids total du fauteuil (à partir de)	Potences Escamotables: à partir de 10,1 kg, Potences Fixes: à partir de 9,9 kg
Poids de transport	Potences Escamotables: à partir de 7,5 kg, Potences Fixes: à partir de 7,3 kg
Coloris de châssis	24 couleurs
Crash test	oui, avec l'option accroche-taxi (approuvé selon ISO 7176-19)

